



TORAST-H™ Bio Vial

在分析低浓度样品或稀少样品时, TORAST-H Bio Vial 是一个极好的选择。该系列样品瓶采用特殊的表面钝化工艺, 有效的避免疏水性物质及离子类物质被样品瓶内表面吸附。


产品特点

- 有效避免有机物质的吸附
- 降低珍贵、稀少样本由于吸附造成的损耗
- 特别适用于肽段、碱性物质的存储分析



胰蛋白酶酶解BSA产物吸附测试 (浓度约等于50μg/mL)

对比普通玻璃材质和聚丙烯材质样品瓶, TORAST-H Bio系列样品吸附损耗更低。

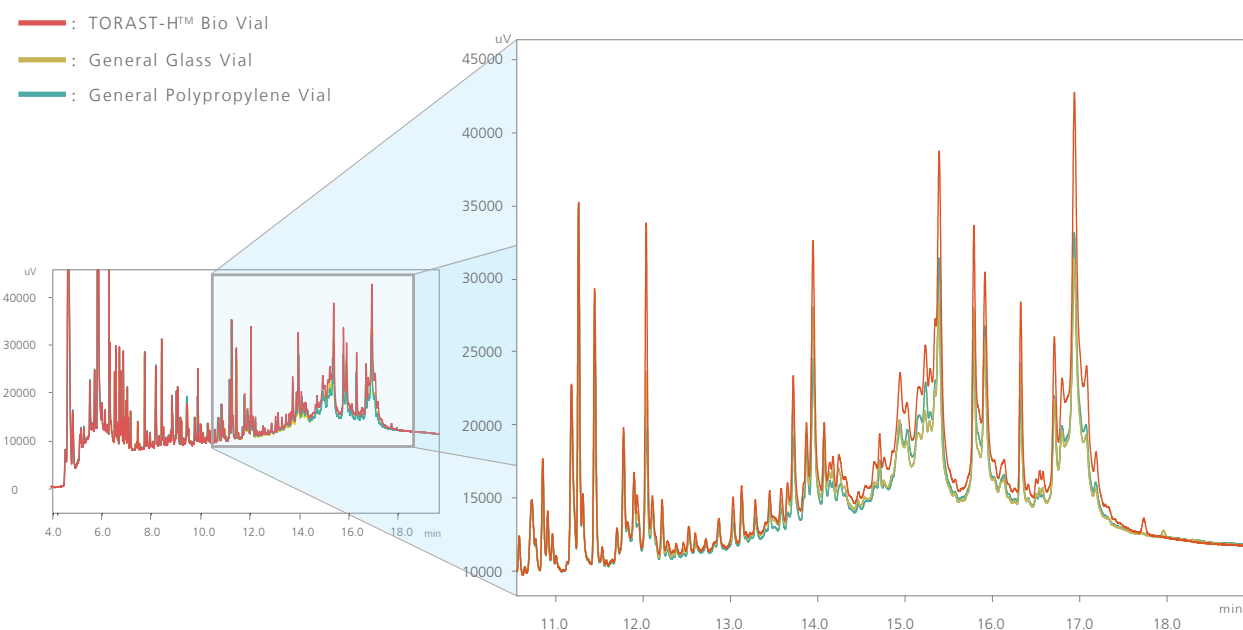

产品信息

- 颜色: 未添加
- 材质: 聚丙烯
- 未灭菌

Name	P/N	Volume	Qty.
TORAST-H™ Bio Vial with cap	370-04350-00	300μL	100

- Avoid sunlight and store at room temperature.
- Cap does not have low adsorption treatment.



岛津(上海)实验器材有限公司
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co., Ltd.

官方网站 <https://www.sglc.shimadzu.com.cn>
客服热线 800-820-7730 / 400-920-7730

地址: 上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期B2栋2F
电话: 021-62800202 传真: 021-52583319 E-mail: contact@sglc.shimadzu.com.cn

北京分公司 电话: 010-84471667 传真: 010-84471669 成都分公司 电话: 028-85953678 传真: 028-85953029
广州分公司 电话: 020-36315399 传真: 020-26282980



扫一扫, 关注微信